

Izstopajte z odličnimi kozmetičnimi nasveti

Multi Skin Test Center® MC 1000 in programska oprema

vlažnost, sebum, melanin, pH-vrednost, prožnost in še veliko več



Zahvaljujoč modularni tehnologiji sond C+K omogoča hkratno upravljanje vseh sond C+K glede na individualne zahteve.

Priključiti je mogoče merilne sonde C+K za naslednje parametre: vlažnost, sebum, pH-vrednost, pigmentacija in rdečica, transepidermalna izguba vode (TEWL – delovanje kožne bariere), temperatura in prožnost kože. Poleg tega je mogoče priklučiti kamero Visioscope® PC 35.



Multi Skin Test Center® MC 750 ponuja funkcije, kot je MC 1000, razen funkcij kamere.

Obrnite se na nas za naše posebne dodatke za prenašanje.

Tehnični podatki:
zunanje napajanje: vhod: 100–240 V, 50–60 Hz, izhod: 12 V, 4 A,
mere: 46 × 22 × 9 cm; teža brez sond: pribl. 1,8 kg,
računalnik: Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10; vmesnik: USB 2.0
Načela merjenja:
vlažnost: kapacitivnost (lestvica 0–99); sebum: fotometrično (lestvica 0–99); prožnost: sesanje (lestvica 0–99); melanin/eritem: absorpcija/odboj (lestvica 0–99); pH-vrednost: steklena elektroda (pH-vrednost z eno decimalno); indeks TEWL: meritev pretoka vode z odprto komoro (lestvica 0–20)
Dodatna naprava Visioscope® PC 35 ali Visiopor® PP 34N

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.



Arlen d.o.o.
Letoviška pot 12, 6000 Koper
W: www.ck-slovenija.si E: info@arlen.pro
T: 040 530 585

Izstopajte z odličnimi kozmetičnimi nasveti

Multi Skin Test Center® MC 1000 in programska oprema

vlažnost, sebum, melanin, pH-vrednost, prožnost in še veliko več

Programska oprema CSI

❖ Za uporabo zelo prijazna in privlačna programska oprema »Complete Skin Investigation« za poenostavitev dela s sistemom.

❖ Individualna priporočila glede izdelkov za nego kože, nego las in zaščito pred soncem, ki jih je mogoče natisniti za stranko.

❖ Preprosto pospeševanje prodaje z edinstveno storitvijo, s katero boste korak pred tekmeči in tudi ohranili stranke.

❖ **Analiza las** (merjenje sebuma, barve, slikanje prhljaja, debeline las) z vprašalnikom in priporočila glede izdelkov.

❖ Odgovori na vprašanja in merjenje vsebnosti melanina omogočajo določitev najprimernejših izdelkov **za zaščito pred soncem** ter nego po sončenju, pri čemer je treba upoštevati, kje, kdaj in kako dolgo bo nekdo izpostavljen soncu, vključno z ustreznim UV-indeksom.

❖ **Posamezne meritve** (vlažnost, sebum, prožnost, pigmentacija/eritem, pH-vrednost, temperatura in TEWL) v katerem koli vrstnem redu in na katerem koli mestu, pri čemer jih lahko nato shranite in natisnete.

❖ Uporabnik lahko preprosto vnese priporočene izdelke v vsak program glede na starost osebe, rezultate meritev in odgovore na vprašanja.

❖ Videz programske opreme je mogoče preprosto spremeniti s prilagoditvijo imena programa, izbiro drugačnih barv ali slike začetnega zaslona, dodajanjem logotipa ali celo pripravo novega vprašalnika.









❖ **Vgrajen je program Visioface® 1000 D** za analizo fotografij celotnega obraza.

Programska oprema s 6 moduli:

❖ Vprašalnik v kombinaciji z meritvami vlažnosti, sebuma in prožnosti ter (izbirnimi) meritvami s kamero računsko določi **tip kože** in priporoči vrsto izdelkov za nego kože (od čiščenja do dnevne in nočne nege, dodatne nege in prehranskih dopolnil) za ženske ter moške.

❖ **Slikanje** s kamero Visioscope® PC35 ter izračun por, pigmentnih madežev in gub. Preprosta primerjava slik strank ena ob drugi.


❖ Nastajanje sebuma in deskvamacijo je mogoče analizirati s posebnimi folijami Sebufix® in Corneofix®.

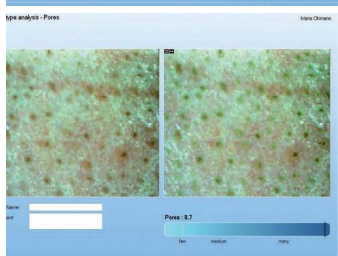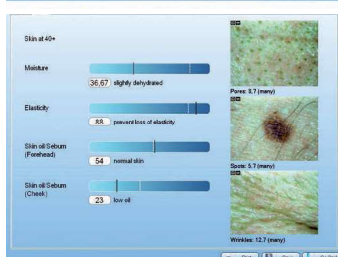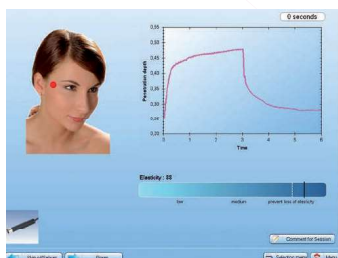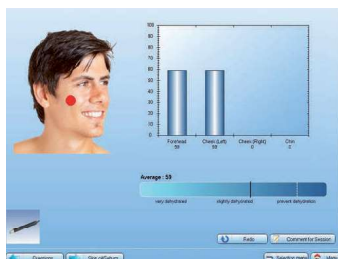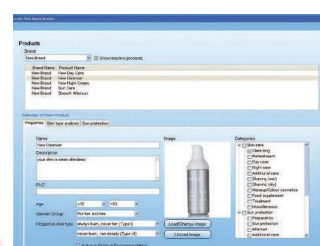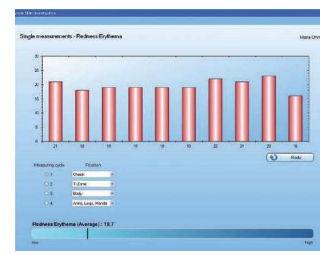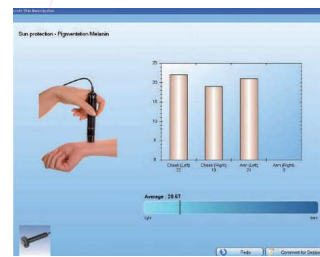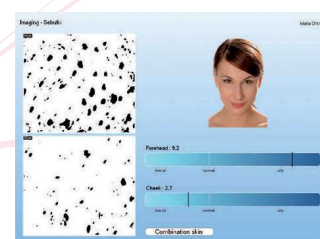


Slikanje celotnega obraza za analizo in dokumentiranje tretmajev

VisioFace® 1000 D

- ✿ slikanje celotnega obraza – celovita, ekonomična analiza obraza
- ✿ strojna oprema, ki obsega fotokabino za slikanje obraza, v katero umestimo obraz (od spredaj ali s strani)
- ✿ 210 belih LED-diod v kabini, ki enakomerno osvetlujejo obraz in ne zahtevajo servisiranja

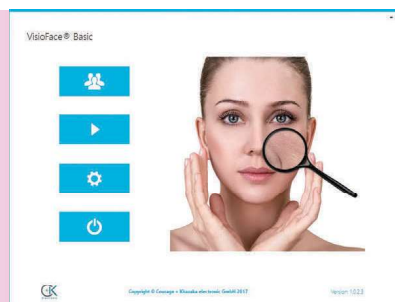

- ✿ vgrajena visokokakovostna zrcalnorefleksna kamera visoke ločljivosti, ki ne zahteva zapletenih nastavitev s strani uporabnika; napravo zgolj priključite prek USB-kabla in jo lahko začnete takoj uporabljati
- ✿ ko kamere VisioFace® ne uporabljate, bele diode nežno svetijo in pri tem ne oddajajo toplote
- ✿ analiza z osnovno programsko opremo VisioFace®
- ✿ možnost uporabe programske opreme Complete Skin Investigation, ki upravlja tudi Multi Skin Test Center

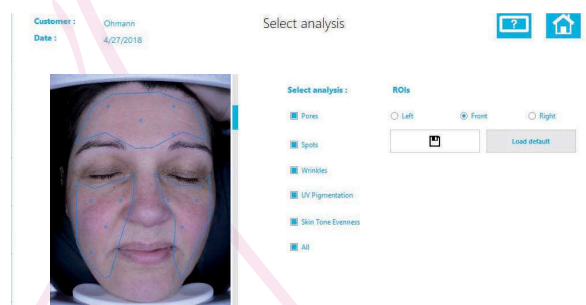


- ✿ ocena vidnih pigmentnih madežev, por, gub in enakomernosti tena kože
- ✿ programska oprema ustvari fotografijo, podobno UV-fotografiji

Slikanje celotnega obraza za analizo in dokumentiranje tretmajev

VisioFace® 1000 D

- maske za ocenjevanje se prikažejo samodejno ter jih je mogoče prilagoditi in shraniti skupaj s podatki o strankah
- z enim klikom zaženete izbrano analizo ali vse analize
- v programsko opremo je mogoče vključiti izdelke, na primer za dnevno in nočno nego ali zaščito pred soncem; priporočila je mogoče dajati glede na starost, spol in rezultate
- informativno poročilo, vključno s fotografijami, rezultati in izdelki, ki ga je mogoče natisniti
- stranka lahko programsko opremo prilagodi po meri, tako da izbere barvo, logotip, sliko in pisavo

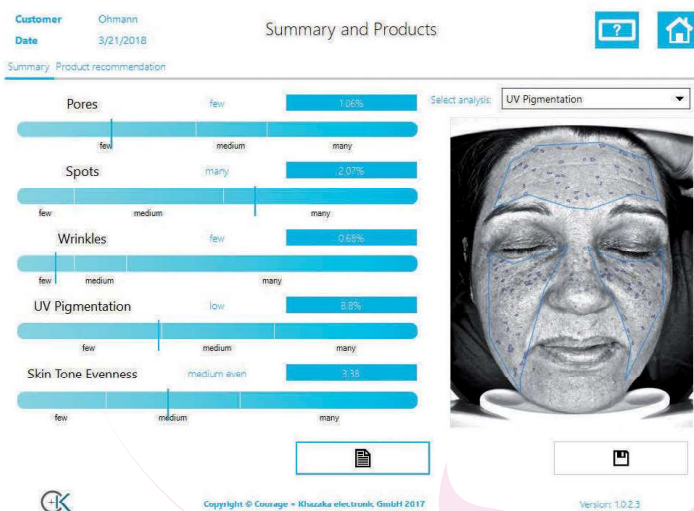

Tehnični podatki
Mere: 54 x 50 x 44 cm, teža: 14 kg;
zunanje napajanje: 100-240 V AC/12 V DC;
kamera: > 12 megapikslov;
svetloba: 210 belih LED-diod;
vmesnik: USB 2.0

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.





Arlen d.o.o.
Letoviška pot 12, 6000 Koper
W: www.ck-slovenija.si E: info@arlen.pro
T: 040 530 585


Slike obraza za dokumentiranje in analizo

VisioFace® lite


- Majhna, privlačno oblikovana naprava za fotografiranje celotnega obraza in analizo slik.
- Edinstveno akrilno steklo, ki usmerja svetlobo in zagotavlja homogeno belo svetlobo. Osvetlitev v stanju pripravljenosti je modro-vijolična.
- Miniaturna kamera (5 megapikslov) zajame podrobno sliko obraza.
- Majhna velikost in nizka teža omogočata preprosto premikanje.
- Stojalo iz akrilnega stekla omogoča, da napravo dvignete na primerno višino na mizi, med transportom pa napravo ščiti.
- Naslonjalo za brado za natančno postavitev, ki omogoča slike od spredaj in s strani.
- Zanimive analize različnih parametrov (pore, gube, pigmentni madeži, poškodbe zaradi sonca, barva, 3D-podrobnosti) na sliki.
- Samodejna priporočila za izdelke in tretmaje.
- VisioFace® lite uporablja priročno programsko opremo Complete Skin Investigation (CSI), ki vsebuje možnost slikanja celotnega obraza.

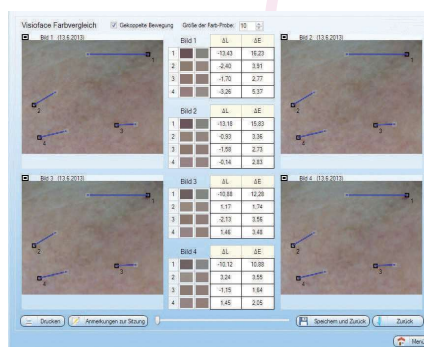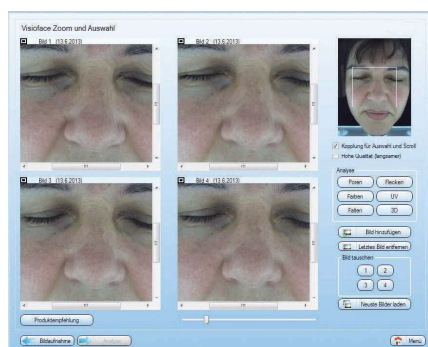


gube

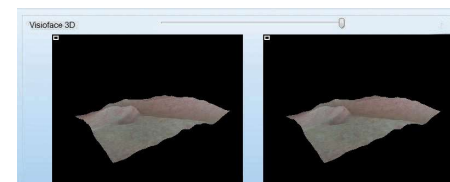


3D-funkcija

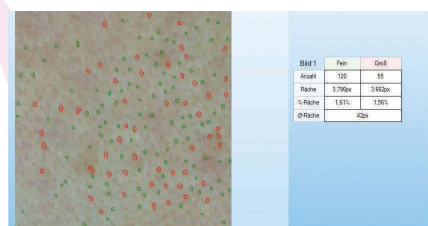

pore

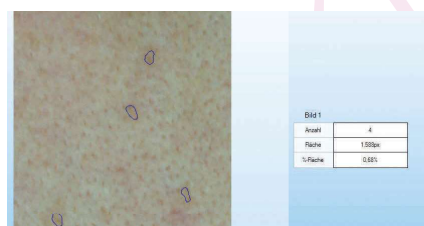

pigmentni madeži

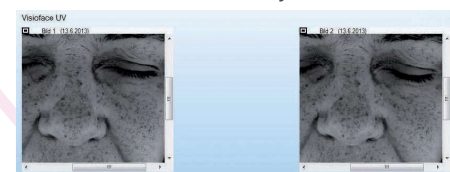

nevidni pigmentni madeži

Tehnični podatki

Mere: VŠG 29,2 x 20,8 x 23 cm, teža (brez stojala): 3,4 kg,
 osvetlitev: modra v stanju pripravljenosti, bela v stanju delovanja (preklapljanje z brezstičnim senzorjem oddaljenosti),
 kamera: 5 megapikslov, ločljivost: 1944 x 2592 slikovnih pik,
 napajanje: osvetlitev: zunanje 100-250 V, 47-63 Hz, DC 12 V/4 A, vrata in kamera: USB 2.0
 računalnik: Windows® 7/8/10, specifikacije računalnika morajo ustrezati zahtevam sistema, USB 2.0/3.0,
 procesor Intel
 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.



Arlen d.o.o.
 Letoviška pot 12, 6000 Koper
 W: www.ck-slovenija.si E: info@arlen.pro
 T: 040 530 585